

HyStool![®]

100% Water Soluble Stool Sample Collection Bags

Flushable, Hygienic, Biodegradable
Environmentally Friendly




Instructions for use



Gebrauchsanleitung



Instructions d' utilisation

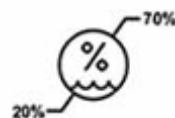

HyStool Ltd, Aberlady, Scotland, Great Britain



Sungro Europe B.V, Netherlands

www.hystool.com



1. Go for a Pee before using.

HyStool bags are 100% water-soluble and can dissolve if they touch water.



2. HyStool bags stick to the toilet seat. The seat must be dry.

If the seat is damp, the stickers may not stick properly. If necessary, dry the seat before using the bag.



3. The HyStool bag comes folded inside a pack.

Take it out and unfold it completely before attaching it to the toilet seat.



4. Peel off backing from two stickers on the wider edge of bag and attach them to the rear of the toilet seat.

The folded edges of the bag are positioned to the sides of the toilet seat.



5. Peel backing paper from remaining two stickers stretch bag forward and attach to seat as shown.

Leave a gap at the front so any accidental discharge of urine misses the bag.



1. Geh vor der Benutzung noch mal pinkeln.
HyStool-Beutel sind zu 100% wasserlöslich und können sich auflösen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen.

2. HyStool-Beutel werden auf den Toilettensitz geklebt. Der Sitz muss trocken sein.

Wenn der Sitz feucht ist, haften die Aufkleber möglicherweise nicht richtig. Trockne den Sitz bei Bedarf, bevor du den Beutel benutzt.

3. Der HyStool-Beutel ist gefaltet in einer Packung.

Nimm ihn heraus und falte ihn vollständig auf, bevor du ihn auf den Toilettensitz legst.

4. Zieh die Folie von den zwei Aufklebern am breiten Ende des Beutels ab und klebe sie hinten auf den Toilettensitz.

Die gefalteten Seiten des Beutels liegen an den Seiten des Sitzes.

5. Zieh die Folie von den letzten zwei Aufklebern ab, zieh den Beutel nach vorn und klebe ihn wie gezeigt auf den Sitz.

Lass vorne eine kleine Lücke, damit versehentlicher Urin nicht in den Beutel gelangt.

1. Va faire pipi avant de l'utiliser.

Les sacs HyStool sont 100% solubles dans l'eau et peuvent se dissoudre au contact de l'eau.

2. Les sacs HyStool se fixent sur la lunette des toilettes. La lunette doit être sèche.

Si elle est humide, les autocollants peuvent ne pas bien coller. Si besoin, sèche la lunette avant d'utiliser le sac.

3. Le sac HyStool est plié dans un emballage.


Sors-le et déplie-le complètement avant de le placer sur la lunette des toilettes.

4. Retire la protection des deux autocollants à l'extrémité large du sac et colle-les à l'arrière de la lunette des toilettes.

Les côtés pliés du sac doivent se placer de chaque côté de la lunette.

5. Retire la protection des deux derniers autocollants, tire le sac vers l'avant et colle-le sur la lunette comme indiqué.

Laisse un petit espace à l'avant pour éviter que de l'urine ne tombe dans le sac par erreur.

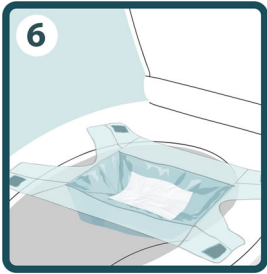

6. Place some toilet paper in bottom of the bag.

Toilet paper helps prevent a wet stool from touching the bag. The bag may dissolve if it gets wet.

6. Lege etwas Toilettenpapier auf den Boden des Beutels.

So wird verhindert, dass nasser Stuhl den Beutel berührt, da er sich bei Kontakt mit Wasser auflösen kann.

6. Mets un peu de papier toilette au fond du sac.

Cela évite que des selles mouillées touchent le sac, car il peut se dissoudre au contact de l'eau.



7. Use toilet as normal.

After your bowel movement collect the stool sample from the HyStool bag as soon as possible.

7. Benutze die Toilette wie gewohnt.

Nach dem Stuhlgang entnimm die Stuhlprobe so schnell wie möglich aus dem HyStool-Beutel.

7. Utilise les toilettes normalement.

Après la selle, prélève l'échantillon de selles dans le sac HyStool dès que possible.



8. collect a stool sample from the HyStool bag using a collection device.

8. Entnimm eine Stuhlprobe aus dem HyStool-Beutel mit dem Probenbehälter.

8. Prélève un échantillon de selles dans le sac HyStool à l'aide du dispositif de collecte.



9. Peel the stickers from the toilet seat and let the bag and contents to fall into toilet water.

Simply Flush Away. HyStool bags are 100% water soluble.

9. Zieh die Aufkleber vom Toilettensitz ab und lass den Beutel samt Inhalt ins Toilettenwasser fallen.

Einfach runterspülen. HyStool-Beutel sind zu 100% wasserlöslich.

9. Retire les autocollants de la lunette et laisse tomber le sac et son contenu dans l'eau des toilettes.

Il suffit de tirer la chasse. Les sacs HyStool sont 100% solubles dans l'eau.



10. If the bag doesn't flush the first time, flush again. Any residue in the bowl can be brushed away.

If sticker marks are left on the seat, wipe them off with a damp cloth.

10. Wenn der Beutel beim ersten Spülen nicht heruntergespült wird, spüle erneut. Rückstände in der Schüssel können abgebürstet werden.

Klebereste auf dem Sitz kannst du mit einem feuchten Tuch abwischen.

10. Si le sac ne part pas au premier essai, tire la chasse une seconde fois. Les résidus dans la cuvette peuvent être brossés.

S'il reste des traces de colle sur la lunette, essuie-les avec un chiffon humide.